

IRIDIUM[®] Baby garze

Medical Device

28 garze sterili per il trattamento perioculare dell'adulto e del bambino

Indicazioni

IRIDIUM Baby garze è indicato per la rimozione, dalle palpebre e dalle ciglia, di croste, cipse o secrezioni dovute a fenomeni infiammatori e/o infettivi. Il suo utilizzo è consigliato anche in associazione a terapie specifiche in caso di patologie oculari di tipo allergico, infiammatorio o infettivo. **IRIDIUM Baby garze** trova impiego per il trattamento perioculare prima e dopo interventi di chirurgia oftalmica e in corso di trattamenti per occlusioni del canalicolo lacrimale.

Composizione

Garza di cotone 100% imbevuta con una soluzione contenente: Glicole propilenico, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Ammonio Glicirizinato, Estratto glicolico di Ananas sativus L., Estratto di Echinacea angustifolia (radice), Sodio bicarbonato E500, Clorexidina digluconato, Sodio Idrossimetilglucinato, EDTA bisodico, Acqua depurata.

Proprietà

Il tessuto in cotone 100% imbevuto con i principi naturali presenti in **IRIDIUM Baby garze**, rendono possibile una completa rimozione di secrezioni, polveri, eventuali corpi estranei, etc. **IRIDIUM Baby garze** ha una mirata compatibilità chimico fisica con il film lacrimale per il suo pH equilibrato, non lascia residui e, grazie ai suoi componenti, può essere impiegato anche quotidianamente per il mantenimento del benessere della zona perioculare.

Modalità d'uso

Dopo aver pulito le mani in modo adeguato, aprire la bustina ed estrarre la garza. Applicare la garza nella zona palpebrale, passandola delicatamente, in modo da permettere un'adeguata asportazione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (smog, pulviscolo, polveri, etc.). Nel caso si presentassero secrezioni particolarmente persistenti o occlusioni del canalicolo lacrimale, è consigliabile scaldare la busta chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40°C circa) e utilizzare poi la garza come impacco caldo massaggiando delicatamente. Inoltre è possibile spremere il contenuto della garza sull'occhio chiuso, reclinando leggermente il capo, massaggiando successivamente con la garza fino ad una rimozione completa dei residui presenti. Nel caso di flogosi è consigliabile raffreddare la bustina chiusa in frigorifero per qualche ora e applicare poi la garza aperta sull'occhio, mantenendo in loco per qualche minuto come impacco freddo.

Controindicazioni

Ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Avvertenze

- Uso esterno.
- La sterilità, la funzionalità e la sicurezza del prodotto sono garantite solo dall'integrità della confezione.
Non utilizzare se la confezione non è integra.
- Le garze sono monouso. Il riutilizzo della garza potrebbe causare infezione oftalmica e/o danni al paziente.
- Seguire attentamente le istruzioni del Medico.
- In caso di stati infettivi non utilizzare la stessa garza per entrambi gli occhi per evitare la contaminazione crociata.
- **Tenere lontano dalla portata dei bambini.**


Effetti collaterali

Non sono noti effetti indesiderati dopo la somministrazione del prodotto. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico.

Modalità di conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla polvere. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sul confezionamento. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo: Giugno 2020

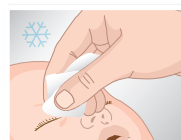

Attenzione



Consultare le istruzioni per l'uso



Data di scadenza



Codice del lotto



Non riutilizzare



Non utilizzare se l'imballaggio non è integro



Sterilizzato a raggi γ



Fabbricante



Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso



STERILE R



Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italia
Tel. +39 049 8232111
www.fidiapharma.com

CE 0373

Rev.B 06/21